



AIMS

AED 雲端管理平台



Test Solutions **for**
Medical Device Manufacturers

Quick Start Guide

Released: 2023.3.27



- AED 雲端管理平台 使用者與使用情境
- 登入 AED 雲端管理平台
- AED 雲端管理平台 總覽
- 建立帳號與客戶 / 以匯入方式新增客戶資料
- 新增 AED 至 AED 雲端管理平台/ 以匯入方式新增 AED
- 查看檢測報告


AED 雲端管理平臺 使用者與使用情境



適用對象	使用情境	連結頁面
AED 代理商/ 經銷商/ 維護商	建立帳號與客戶	<ul style="list-style-type: none">① 建立使用者帳號② 建立客戶資料③ 匯入客戶資料
	新增 AED 至 AED 雲端管理平台/ 以匯入方式新增 AED	<ul style="list-style-type: none">① 新增 AED 至 AIMS② 匯入 AED 資料
	查看檢測報告	<ul style="list-style-type: none">① 審核檢測報告② 取得檢測報告



登入 AED 雲端管理平台

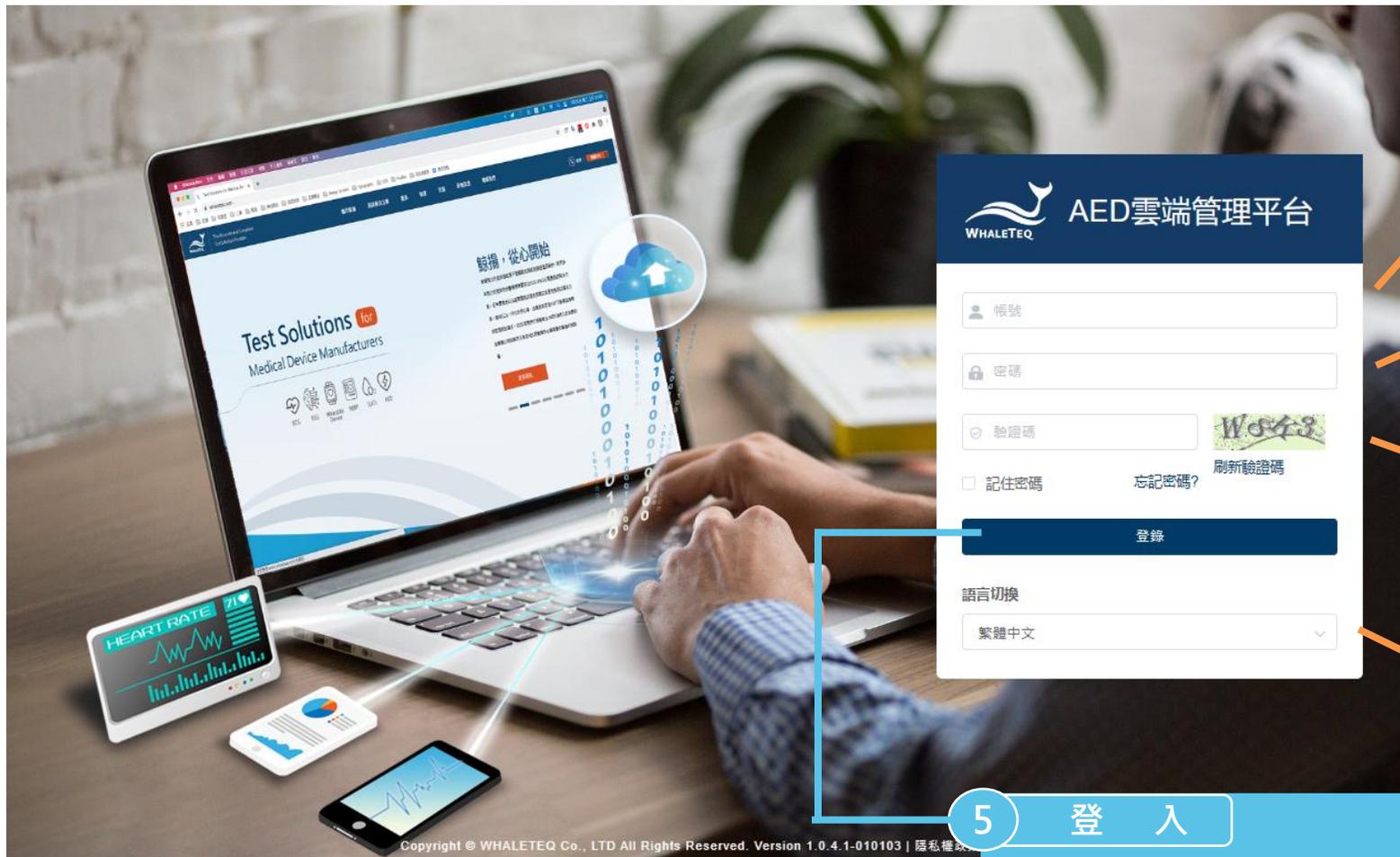

1 帳號
輸入帳號名稱

2 密碼
輸入密碼

3 驗證碼
如超過一定時間，需點擊刷新
驗證碼以取得一組新的驗證碼

4 語言
選擇繁體中文

5 登入
點擊登入

AED 雲端管理平台 總覽



The screenshot displays the AED Cloud Management Platform interface. It features a sidebar with navigation options: 首頁, 我的消息, 銷售管理, 監測, 工單, 報告, 統計, and 帳號管理. The main content area is divided into four sections:

- 2.1 事件**: A table listing events with columns for 單位, 產品序號, 狀態, and 時間.
- 2.2 工單狀態表**: A table listing work orders with columns for 單位, 類型, 狀態, and 建立時間.
- 2.3 設備狀態**: A map of Taiwan showing the locations of AED devices with colored markers (green, yellow, red).
- 2.4 工單處理統計分析**: A bar chart showing the distribution of work orders by category over time.

1 功能列表
功能總表

2 監控資料
包含事件、工單一覽表、設備狀態以及工單處理統計分析

2.1 事件
按時間綫列出，包括貼片、電池到期和年度服務到期日

2.2 工單
列出所有工單，含報警、保養、安裝、培訓及其他工單...

2.3 設備狀態
以綠燈、黃燈或紅燈來顯示不同狀態的 AED

2.4 年度工單統計
一年內的工單類別統計

建立帳號與客戶- 建立使用者帳號



AED云端管理平台 首页 / 账号管理 / 用户管理 简体中文

用户管理 组织管理 工单总表

查询项目

+ 新增 导入 下载样板

操作	组织	用户账号	姓名	手机号码	创建时间	角色
编辑 删除 重置密码 详情	榆意森活村-所长官舍	ABC	ABC		2023-02-17 08:46:40	User

添加用户

* 姓名 请输入姓名 * 归属部门 请选择归属部门

手机号码 请输入手机号码 * 邮箱 请输入邮箱

* 用户账号 请输入用户账号 性别 请选择性别

状态 正常 停用 用户类型 消息提醒 工单处理

* 角色 请选择角色 默认语系 简体中文

备注 请输入内容

确定 取消

① 點擊「帳號管理」。

② 選擇「用戶管理」。

③ 選擇「新增」來創建使用者帳號。

④ 填寫帳號信息。請注意用戶類型是指用戶依不同工作項目能收到的提醒通知。

⑤ 點擊「確定」以完成操作。

用戶類型 消息提醒 工单处理

建立帳號與客戶- 建立客戶資料



1 账号管理

2 组织管理

3 + 新增

4 添加组织

组织名称	组织类型	状态	操作
嘉义市政府	代理商	正常	修改 + 新增 删除 详情
嘉义市政府教育处	代理商	正常	修改 + 新增 删除 详情
好市多			详情
台湾电力			详情
嘉义市海洋局			详情

添加组织

组织类型 代理商 部门 客户

* 上级组织 选择上级组织
上级组织不能为空

* 公司名称 请输入公司名称
公司名称不能为空

* 联络人 请输入联络人
负责人不能为空

显示排序 0

联系电话 请输入联系电话

邮箱 请输入邮箱

状态 正常 停用

详细地址 请输入详细地址

确定 取消

- ① 點擊「帳號管理」。
- ② 選擇「組織管理」。
- ③ 選擇「新增」來輸入 AED 所在地。
- ④ 前往「添加組織」繼續操作。

建立帳號與客戶- 建立客戶資料



添加组织

5 组织类型 代理商 部门 客户

6

* 上级组织 选择上级组织
上级组织不能为空

* 公司名称 请输入公司名称
公司名称不能为空

* 显示排序 0

* 联络人 请输入联络人
负责人不能为空

联系电话 请输入联系电话

邮箱 请输入邮箱

状态 正常 停用

详细地址 请输入详细地址

7 确定 取消

⑤ 選擇「客戶」。

*請注意，每台 AED 皆須分配給一組客戶，
我們才可以進行下一頁說明的銷售流程。

⑥ 填寫機構信息。

⑦ 點擊「確定」創建。

建立帳號與客戶-匯入客戶資料



1

Customer	Contact	Phone	Email	Address	Location	Brand	Model	S/N#	Installation Date	Warranty Date	Battery Expir. Date	Pad Expir. Da
Lux Hotel	Wang	0225060000	user10500@meridianq	No. 221, Sec. 2, Zhishan Rd., Shilin	Lobby	ZOLL	AED PLUS	X13L639168	4/25/2015	4/25/2020	8/3/2023	8/3/2023
YangYang Pet	Lin	037970000	user10600@meridianq	No. 10, Wenzhong Rd., Taoyuan	Counter	PHILIPS	HS1	A13J-05713	4/9/2014	4/9/2019	12/31/2022	7/31/202
Fish ABC	Fiona	0228940000	user10400@meridianq	No. 92, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist.,	Counter	PHILIPS	FRX	B13F-02655	4/22/2014	4/22/2019	8/3/2023	8/3/2023

① 準備一份excel文件，填寫你的客戶信息。

2

Organization import					Device basic information import					Sales record import						
Customer name (required)	Person in charge (required)	Contact number	Email	Address	Model name (required)	Serial No (required)	MFG (required)	Purchase	Shipping	Model name (required)	Serial No. (required)	Warranty (required)	Distributor	Customer (required)	Contact (required)	Phone
Lux Hotel	Wang	0225060000	aimsuser1	(No. 221, Sec. 2, Zhishan Rd., Shilin	ZOLL_AED Plus	X13L639168				ZOLL_AED Plus	X13L639168			Lux Hotel	Wang	022506
YangYang Pet	Lin	037970000	aimsuser1	(No. 10, Wenzhong Rd., Taoyuan	Philips_HS1	A13J-05713				Philips_HS1	A13J-05713			YangYang Pet	Lin	037970
Fish ABC	Fiona	0228940000	aimsuser1	(No. 92, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist.,	Philips_FRx	B13F-02655				Philips_FRx	B13F-02655			Fish ABC	Fiona	022894

組織信息導入

設備基本信息導入

銷售紀錄導入

② 將文件中的客戶信息複製到鯨揚科技的 excel 樣板中。

*此文件將在以下步驟中使用。

建立帳號與客戶-匯入客戶資料



3 點擊「賬號管理」。

4 選擇「組織管理」。

5 下載樣板。

6 複製「組織信息導入」，從 excel 文件粘貼到您剛才下載的樣板。

Organization name (required)	Person in charge (required)	Contact number	Email	Address
Lux Hotel	Wang	0225060000	aimsuser10	No. 221, Sec. 2, Zhishan Rd., Shilin Dist., Taipei City, Taiwan
YangYang Pet	Lin	037970000	aimsuser10	No. 10, Wenzhong Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, Taiwan
Fish ABC	Fiona	0228940000	aimsuser10	No. 92, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan

公司名称 (required)	联络人 (required)	联系电话	邮箱	地址
Lux Hotel	Wang	0225060000	aimsuser10	No. 221, Sec. 2, Zhishan Rd., Shilin Dist., Taipei City, Taiwan
YangYang Pet	Lin	037970000	aimsuser10	No. 10, Wenzhong Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, Taiwan
Fish ABC	Fiona	0228940000	aimsuser10	No. 92, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan

建立帳號與客戶-匯入客戶資料



The screenshot shows the 'Organization Management' interface. A modal window titled '导入' (Import) is open, with the '客户' (Customer) radio button selected. A dropdown menu for '上级组织' (Parent Organization) is highlighted with an orange box and the number 8. Below the modal, a file explorer shows a list of templates, with 'Organization import template' highlighted by an orange box and the number 9. A red text box '組織信息導入' (Import Organization Information) is overlaid on the file explorer. The main interface includes a sidebar with navigation options like '首页', '我的消息', '销售管理', '监测', '工单', '报告', '统计分析', and '账号管理'. The top navigation bar shows '首页 / 账号管理 / 组织管理' and a language dropdown set to '简体中文'.

⑦ 返回 AIMS，點擊「導入」。

⑧ 填寫上級組織。

(即您的管理員帳戶)

⑨ 選擇剛剛編輯的文件。

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 型號



The screenshot shows the AED Cloud Management Platform interface. On the left, there is a navigation menu with 'Sales Management' (销售管理) highlighted. Below it, 'Models' (型号) is also highlighted. The main content area shows a table of AED models with columns for 'Operation' (操作), 'Brand' (品牌), 'Model' (型号), 'Product Name' (产品名称), and 'Status' (状态). The table lists several models, including Philips FR2, defibtech DDU-100E, Zoll AED Pro, and others. A red box highlights the 'Sales Management' and 'Models' menu items, and another red box highlights the table content.

操作	品牌	型号	产品名称	状态
修改 详情 删除 设置代理商	PHILIPS	FR2	Philips_FR2	开启
修改 详情 删除 设置代理商	defibtech	DDU-100E	defibtech_DDU-100E	开启
修改 详情 删除 设置代理商	ZOLL	AED Pro	ZOLL_AED Pro	开启
修改 详情 删除 设置代理商	NIHON KOHDEN	AED-2100K	NIHON KOHDEN_2100K	开启
修改 详情 删除 设置代理商	PHILIPS	HS1	Philips_HS1	开启
修改 详情 删除 设置代理商	HEARTSINE	SAM 300P	HEARTSINE_300P	开启
修改 详情 删除 设置代理商	思德夢想	ARK-501	思德夢想_ARK-501	开启
修改 详情 删除 设置代理商	NIHON KOHDEN	AED-2150K	NIHON KOHDEN_2150K	开启
修改 详情 删除 设置代理商	Physio-Control	CR PLUS	Physio-Control_CR PLUS	开启
修改 详情 删除 设置代理商	HEARTSINE	SAM 500P	HEARTSINE_500P	开启

① 點擊「銷售管理」。

② 選擇「型號」。

③ 常見的 AED 型號已經內置在此，
無需自己添加。

*如果您的 AED 型號不包括在內，
請聯繫我們的業務團隊。

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 庫存管理



The screenshot shows the AED Cloud Management Platform interface. The breadcrumb navigation path is '首页 / 销售管理 / 库存管理'. The left sidebar contains a menu with '销售管理' (Sales Management) and '库存管理' (Inventory Management) highlighted with orange boxes and numbered 1 and 2 respectively. The main content area has a '查询项目' (Query Item) section with three buttons: '+ 新增' (Add), '导入' (Import), and '下载样板' (Download Template). The '+ 新增' button is highlighted with an orange box and numbered 3. Below the buttons is a table with columns: '操作' (Action), '单位' (Unit), '产品序号' (Product No.), '生产日期' (Production Date), '购入日期' (Purchase Date), '出库日期' (Shipment Date), and '出售状态' (Sales Status). The table currently shows '暂无数据' (No data). At the bottom, there is a pagination bar showing '共 0 条' (Total 0 items), '10条/页' (10 items/page), and '前往 1 页' (Go to page 1).

- ① 點擊「銷售管理」。
- ② 選擇「庫存管理」。
- ③ 點擊「新增」添加客戶的 AED 到 AIMS 數據庫中。

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 庫存管理



新增设备基础资讯

1 基本资讯

2 产品名称 请输入产品名称

3 产品序号 请输入产品序号
生产日期 请输入生产日期
购入日期 请输入购入日期
出库日期 请输入出库日期

4 确定 取消

① 輸入 AED 基本信息。

② 從下拉選單中選擇「產品名稱」。

③ 填寫其他信息。

④ 點擊「確定」繼續。

Please enter model name

- HEARTSINE_300P
- 思傑夢想_ARK-501
- NIHON KOHDEN_2150K
- Physio-Control_CR PLUS
- HEARTSINE_300P
- NIHON KOHDEN_3100K
- Gardiac Science_9300E
- SCHILLER_FRED easy

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 庫存管理



AED 雲端管理平台 首页 / 销售管理 / 库存管理

1 设备出售

基本资讯

组织名称 组织类型 负责人 联系方式

请输入组织名称 请选择组织类型 请输入负责人 请输入联系方式

查询 重置

	组织名称	组织类型	负责人	联系方式	状态	创建时间
<input type="checkbox"/>	公園管理處	代理商			正常	2023-02-22 08:29:04
<input type="checkbox"/>	嘉義市立棒球場	客戶			正常	2023-02-22 08:03:51
<input type="checkbox"/>	嘉義市立體育場(田徑場)	客戶			正常	2023-02-22 08:03:51
<input type="checkbox"/>	檳榔寮活村-所長官舍	客戶			正常	2023-02-15 09:40:38
<input type="checkbox"/>	檳榔寮活村	客戶			正常	2023-02-15 09:40:38
<input type="checkbox"/>	嘉義市消防局後湖分隊	客戶			正常	2023-02-15 09:00:54
<input type="checkbox"/>	嘉義市消防局東區分隊	客戶			正常	2023-02-15 09:00:54
<input type="checkbox"/>	嘉義市消防局蘭潭分隊	客戶			正常	2023-02-15 09:00:54
<input type="checkbox"/>	嘉義市消防局第二分隊	客戶			正常	2023-02-15 09:00:54
<input type="checkbox"/>	嘉義市消防局德安分隊	客戶			正常	2023-02-15 09:00:54

2

出售状态

待出售

已买断

已买断

已买断

已买断

已买断

已买断

已买断

待出售

已买断

4 > 前往 1 页

① 進入「設備出售」。

② 選擇您要銷售的客戶。

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 庫存管理



② 選擇您要銷售的客戶。

	组织名称	组织类型	负责人	联系方式	状态	创建时间
<input type="checkbox"/>	公園管理处	代理商			正常	2023-02-22 08:29:04
<input checked="" type="checkbox"/>	嘉義市立棒球場	客戶			正常	2023-02-22 08:03:51
<input type="checkbox"/>	嘉義市立體育場(田徑場)	客戶			正常	2023-02-22 08:03:51
<input type="checkbox"/>	檳榔寮活村-所長官舍	客戶			正常	2023-02-15 09:40:38
<input type="checkbox"/>	檳榔寮活村	客戶			正常	2023-02-15 09:40:38
<input type="checkbox"/>	嘉義市消防局後湖分隊	客戶			正常	2023-02-15 09:00:54
<input type="checkbox"/>	嘉義市消防局東區分隊	客戶			正常	2023-02-15 09:00:54
<input type="checkbox"/>	嘉義市消防局蘭潭分隊	客戶			正常	2023-02-15 09:00:54
<input type="checkbox"/>	嘉義市消防局第二分隊	客戶			正常	2023-02-15 09:00:54
<input type="checkbox"/>	嘉義市消防局德安分隊	客戶			正常	2023-02-15 09:00:54

共 14 条 10条/页 < 1 2 > 前往 1 页

③ 選擇買斷時間。

④ 點擊「下一步」繼續。

② 選擇您要銷售的客戶。

③ 選擇買斷時間。

④ 點擊「下一步」繼續。

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 庫存管理



设备出售

基础信息 监测信息 配件信息 耗材信息

产品名称 Philips_FR2 型号 FR2 产品类别 AED

品牌 PHILIPS 制造商 PHILIPS

组织 嘉义市政府 *产品序号 1234 *生产日期 2023-03-17

*保固日期 请选择保固日期 经销商名称 请输入经销商名称 出厂报告 选取文件 最多上传

*单位 日期选择器 (2023年3月) 给人 连凯威 联系电话 请输入联系电话

职称 邮箱 请输入邮箱 *计划安装时间 请选择计划安装时间

证照管理员

*详细地址

*所在位置描述

教育培训

选择人员 删除

教育培训时间	讲师	联系电话	邮箱	教育培训地点

⑤ 繼續填寫 AED 基礎信息。

⑥ 填寫保固日期、聯絡人及地址等。

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 庫存管理



7 设备消息通知人员

7 工单处理人员

7 检验报告接收人员

8 选择人员 新增 删除

姓名	手机号码	邮箱	组织
证照管理员			
whaleteq_isa		ialeteq.com	嘉義市政府
Ann_Test	Ann	i@whale.co	嘉義市政府

9 下一步 取消

⑦ 指定工作人員負責工單處理、接收消息通知與檢驗報告。

⑧ 您可以在現有列表中選擇一個人，也可以點擊「新增」填寫一個新的人（工單處理人員除外）。

*如果您從現有列表中選擇，將出現一個彈出視窗。

⑨ 點擊「下一步」繼續。

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 庫存管理



操作成功

设备出售

基础信息 监测信息 配件信息 耗材信息

添加

操作	耗材名称	品牌	型号	供应商	有效天数	到期日
删除	Standard-Pad		Standard-Pad	Standard	1095	2026-04-06 00:00:00
删除	Standard-Battery		Standard-Battery	Standard	1460	2027-04-06 00:00:00

确定 取消

10

11

操作	单位	产品序号	生产日期	购入日期	出库日期	出售状态
修改 详情 出售 续租 出售历史		123	2023-03-10	2023-03-17	2023-03-31	待出售

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页

⑩ 直接點擊「確定」即可跳過監測與配件信息，并使用內置耗材信息。

⑪ 進入主列表，您會看到 AED 已添加到列表中。

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 安裝工單



1 2 3 4

操作	单位	工单编号	来源	工单状态	创建人	工单开立时间	产品序号
详情 分派 删除 回退 处理		TR20230320092000...	(A)	待分派	system	2023-03-20 17:20:01	1234
详情 分派 删除 回退 处理		IQ202303200918576...	(A)	待分派	system	2023-03-20 17:18:58	1234
详情 分派 删除 回退 处理	台湾电力公司 嘉義區營業處	BM20230315020047...	(A)	已完结	陳佳佑	2023-03-15 10:00:48	X17G940523
详情 分派 删除 回退 处理	好市多股份有限公司嘉義...	BM20230315015848...	(A)	已完结	陳佳佑	2023-03-15 09:58:49	X13G616818

组织	用户账号	姓名	联系电话	邮箱
<input checked="" type="checkbox"/>	嘉义市政府	whaletc	陳	iletq.com

現在，可以開始處理安裝工單。

- ① 點擊「工單」。
- ② 選擇「工單總表」。
- ③ 選擇「分派」。
- ④ 確認工單處理人員。

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 安裝工單



WHALETEQ AED 雲端管理平台

首页 / 工单 / 工单总表

简体中文

首页 | 工单总表 | 检验报告

查询项目
展开以查询项目。

新增 导出

操作	单位	工单编号	来源	工单状态	创建人	工单开立时间	产品序号
详情	棒球場	TR20230320092000...	Ⓐ	待分派	system	2023-03-20 17:20:01	1234
分派	棒球場	IQ202303200918576...	Ⓐ	待处理	system	2023-03-20 17:18:58	1234
回返	嘉義區營業處	BM20230315020047...	🔄	已完结	陳佳佑	2023-03-15 10:00:48	X17G9405
处理							X13G6168

5

6

安装单处理

基础信息 | 监测信息 | 配件信息 | 耗材信息

产品名称: Philips_FR2 | 型号: FR2 | 产品类别: AED

品牌: PHILIPS | 制造商: PHILIPS

组织: 嘉義市政府 | 产品序号: 1234 | 生产日期: 2023-03-17

保固日期: 2023-03-24 | 经销商名称: 请输入经销商名称 | 出厂报告

单位: 嘉義市立棒球場 | 联络人: 連凱威 | 联系电话: 0225176255

职称: 请输入职称 | 邮箱: whaleteq@whaleteq.com | 计划安装时间: 2023-04-07 00:00:00

下次保养时间: 请输入下次保养开始时间 | 证照管理员: 请输入证照管理员

详细地址: 台北市中山區松江路125號8樓

所在位置描述: test

⑤ 點擊「處理」設置安裝工單。

只有在安裝工單創建好後，我們才能開始設置并分派其他工單。

⑥ 填寫客戶 AED 的基本信息。

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 安裝工單



安装单处理

基础信息 配件信息 耗材信息

添加

操作	耗材名称	品牌	型号	供应商	有效天数	到期日
删除	Standard-Pad		Standard-Pad	Standard	1095	2026-04-06 00:00:00
删除	Standard-Battery		Standard-Battery	Standard	1460	2027-04-06 00:00:00

7 确定 取消

⑦ 點擊「確定」即可完成安裝工單的設置。

⑧ 您已經成功創建了一個安裝工單，現在可以添加其他類別的工單。

首页 / 工单 / 工单总表

操作成功

简体中文

查询项目
展开以查询项目。

新增 导出

操作	单位	工单编号	来源	工单状态	创建人	工单开立时间	产品序号
详情 分派 删除 回退 处理	嘉義市立棒球場	TR2023032009200056...	(A)	待分派	system	2023-03-20 17:20:01	1234
详情 分派 回退 处理	嘉義市立棒球場	IQ20230320091857675...	(A)	已完结	system	2023-03-20 17:18:58	1234

8

新增 AED 至 AED 雲端管理平台- 建立新工單



The screenshot shows the '工单总表' (Work Order Summary) page. A '新增' (Add) button is highlighted with a red circle and labeled '9'. A dropdown menu is open, listing '警報工單' (Alarm Work Order), '保養工單' (Maintenance Work Order), '教育訓練' (Education/Training), and '其他工單' (Other Work Order). The '保養工單' option is selected, and a modal form titled '新增保养单' (Add Maintenance Order) is displayed, labeled '10'. The form contains the following fields:

操作	单位	工单编号	来源	工单状态	创建人	工单开立时间	产品序号
分派 删除 回退 处理	嘉義市立棒球場	TR2023032009200056...	(A)	待分派	system	2023-03-20 17:20:01	1234

新增保养单		
处理项目: 设备保养和更换耗材	更换项目: 请选择需要更换项目	
组织: 嘉義市政府	品牌: PHILIPS	产品类别: AED
产品序号: 1234	型号: FR2	制造商: PHILIPS
生产日期: 2023-03-17 00:00:00	保固日期: 2023-03-24 00:00:00	上次保养时间: 请选择上次保养时间
单位: 嘉義市立棒球場	联络人: 連凱威	联络电话: 0225176255
职称:	邮箱: whaleteq@whaleteq.com	
详细地址: 台北市中山區松江路125號8樓		
所在位置描述: test		
备注说明:		

⑨ 點擊「新增」建立新工單。

一共有 4 種類別：警報、保養、教育訓練和其他工單。

⑩ 選擇「保養工單」進行定期維護測試。

以匯入方式新增 AED 至 AIMS



1

Customer	Contact	Phone	Email	Address	Location	Brand	Model	S/N#	Installation Date	Warranty Date	Battery Expir. Date	Pad Expir. Da
Lux Hotel	Wang	0225060000	user10500@meridianq	No. 221, Sec. 2, Zhishan Rd., Shilin	Lobby	ZOLL	AED PLUS	X13L639168	4/25/2015	4/25/2020	8/3/2023	8/3/2023
YangYang Pet	Lin	037970000	user10600@meridianq	No. 10, Wenzhong Rd., Taoyuan	Counter	PHILIPS	HS1	A13J-05713	4/9/2014	4/9/2019	12/31/2022	7/31/202
Fish ABC	Fiona	0228940000	user10400@meridianq	No. 92, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., N	Counter	PHILIPS	FRX	B13F-02655	4/22/2014	4/22/2019	8/3/2023	8/3/2023

① 準備一份 excel 文件，填寫客戶的 AED 信息。

2

Organization import					Device basic information import					Sales record import						
Customer name (required)	Person in charge (required)	Contact number	Email	Address	Model name (required)	Serial No (required)	MFG (required)	Purchase	Shipping	Model name (required)	Serial No. (required)	Warranty (required)	Distributor	Customer (required)	Contact (required)	Phone
Lux Hotel	Wang	0225060000	aimsuser1	(No. 221, Sec. 2, Z	ZOLL_AED Plus	X13L639168				ZOLL_AED Plus	X13L639168			Lux Hotel	Wang	022506
YangYang Pet	Lin	037970000	aimsuser1	(No. 10, Wenzhon	Philips_HS1	A13J-05713				Philips_HS1	A13J-05713			YangYang Pet	Lin	037970
Fish ABC	Fiona	0228940000	aimsuser1	(No. 92, Jian 1st R	Philips_FRx	B13F-02655				Philips_FRx	B13F-02655			Fish ABC	Fiona	022894

組織信息導入

設備基本信息導入

銷售紀錄導入

② 將文件中的信息複製到鯨揚科技的 excel 模板中，包括組織、設備、銷售記錄。

*此文件將在以下步驟中使用。

以匯入方式新增 AED 至 AIMS- 庫存管理



3 銷售管理

4 庫存管理

5 下載樣板

操作	单位	产品序号	生产日期	购入日期	出库日期	出售状态
修改 详情 出售 续租 出售历史	嘉義市立棒球場	1234	2023-03-17	2023-03-24	2023-03-30	已买断
修改 详情 出售 续租 出售历史		555	2023-03-17	2023-03-24	2023-03-31	已买断
修改 详情 出售 续租 出售历史	Alpha	A771-01599	2015-06-20	2015-06-20	2015-06-20	已买断

③ 點擊「銷售管理」。

④ 選擇「庫存管理」。

⑤ 下載樣板。

6 設備基本信息導入

Model name (required)	Serial No (required)	MFG (required)	Purchase	Shipping
ZOLL_AED Plus	X13L168168	2015/4/15	2015/4/15	2015/4/15
Philips_HS1	A13J-07777	2014/3/30	2014/3/30	2014/3/30
Philips_FRx	B13F-05555	2014/4/12	2014/4/12	2014/4/12

⑥ 複製「設備基本信息導入」

從 excel 文件導入并粘貼到

剛才下載的樣板。

	A	B	C	D	E
1	产品名称 (required)	产品序号 (required)	生产日期 (required)	购入日期	出库日期
2	ZOLL_AED Plus	X13L168168	2015/4/15	2015/4/15	2015/4/15
3	Philips_HS1	A13J-07777	2014/3/30	2014/3/30	2014/3/30
4	Philips_FRx	B13F-05555	2014/4/12	2014/4/12	2014/4/12

以匯入方式新增 AED 至 AIMS- 庫存管理



The screenshot shows the AIMS inventory management interface. The 'Import' button is highlighted with a red circle and the number 7. A file explorer window is open, showing the 'Downloads' folder with three files: 'Organization import template', 'Device basic information import template' (highlighted with a red circle and the number 8), and 'AIMS Import Step'. A red callout box with the text '設備基本信息導入' points to the selected file.

操作	单位	产品序号	生产日期	购入日期	出库日期	出售状态
修改 详情 出售 续租 出售历史	嘉義市立棒球場	1234	2023-03-17	2023-03-24	2023-03-30	已买断
修改 详情 出售 续租 出售历史		555	2023-03-17	2023-03-24	2023-03-31	已买断
修改 详情 出售 续租 出售历史	Alpha	A771-01599	2015-06-20	2015-06-20	2015-06-20	已买断

生产日期	购入日期	出库日期	出售状态
	2023-03-17	2023-03-31	待出售

⑦ 返回 AIMS，點擊「導入」。

⑧ 選擇剛剛編輯的文件。

以匯入方式新增 AED 至 AIMS- 銷售紀錄



AED 雲端管理平台

首頁 / 銷售管理 / 銷售紀錄

简体中文

1 銷售管理

2 銷售紀錄

3 導入 下載樣板 导出

操作	單位	詳細地址	所在位置描述	產品名稱	產品序號	型號	產品類別
修改 詳情	嘉義市立棒球場	台北市中山區松江路125號...	test	Philips_FR2	1234	FR2	AED
修改 詳情	嘉義市立博物館	台灣台北市松江路120號	1F	Philips_HS1	A12B-04727	HS1	AED
修改 詳情	GIGI	No. 80, Yiwen 1st St., Tao...	Office	Philips_FRx	A88I-02285	FRx	AED
修改 詳情	Alpha	No. 993, Guohua Rd., Mia...	Office	Philips_HS1	A77I-01599	HS1	AED

銷售紀錄導入

4 Sales record import

Model name (required)	Serial No. (required)	Warranty (required)	Distributor	Customer (required)	Contact (required)	Phone	Job title	Email	Address (required)	Location	Installation end time	License administrator	Training Program	Person to be notified (required)	Work order processor (required)
ZOLL_AED Plus	X13L168168	2020/4/25		Lux Hotel	Wang	0225060000		aimsuse	No. 221, Sec. 2, Zhisha	Lobby	2015/4/25			global	global_op
Philips_HS1	A13J-07777	2019/4/9		YangYang Pet	Lin	037970000		aimsuse	No. 10, Wenzhong Rd.	Counter	2014/4/9			global	global_op
Philips_FRx	B13F-05555	2019/4/22		Fish ABC	Fiona	0228940000		aimsuse	No. 92, Jian 1st Rd., Zh	Counter	2014/4/22			global	global_op

Sales record import template - Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
产品名称 (required)	产品序号 (required)	保固日期 (required)	经销商名称	单位 (required)	联络人 (required)	联系电话	职称	邮箱	详细地址 (required)	所在位置描述	安装结束时间
ZOLL_AED Plus	X13L168168	2020/4/25		Lux Hotel	Wang	0225060000		aimsuse	No. 221, Sec. 2, Zhisha	Lobby	2015/4/25
Philips_HS1	A13J-07777	2019/4/9		YangYang Pet	Lin	037970000		aimsuse	No. 10, Wenzhong Rd.,	Counter	2014/4/9
Philips_FRx	B13F-05555	2019/4/22		Fish ABC	Fiona	0228940000		aimsuse	No. 92, Jian 1st Rd., Zh	Counter	2014/4/22

① 點擊「銷售管理」。

② 選擇「銷售紀錄」。

③ 下載樣板。

④ 複製「銷售紀錄導入」

從 excel 文件導入并粘貼到

剛才下載的樣板。

⑤ 導入AIMS。

查看檢測報告- 提交



1 报告

2 检验报告

3

操作	单位	状态	产品类别	产品名称	产品序号	报告编码
详情 修改 提交 签核 发送	Wei Chuan Foods...	To be submitted	AED	Physio-C...	42282406	JY20230306092401336631

确定提交检验报告?

取消 确定

① 點擊「報告」。

② 選擇「檢驗報告」。

③ 每次使用 DFS200 APP 測試完成後，都會得到一份完整的檢測報告。

只有管理員提交并給予批准後，其他工作人員才會收到。

查看檢測報告- 簽核



4 检验报告签核 ×

基本资讯

产品类别 AED	品牌 PHILIPS	设备型号 HS1
产品序号 A12B-04727	制造商 PHILIPS	
单位 嘉義市	联络人 林孟聰	联系电话 05-2788225
职称	邮箱 (待確認)	保固日期 2016-07-23
详细地址 嘉義市		

签核信息

签核结果	签核意见	签核人	签核时间
暂无数据			

签核信息

签核信息 通过 驳回

5 签核意见 通过意见可以不填，驳回意见必填

6 确定 取消

④ 進行檢測報告簽核。

⑤ 向下滾動以填寫您的簽核意見。

⑥ 點擊「確定」繼續。

查看檢測報告- 發送



7 发送

8 确定

	操作	单位	状态	产品类别	产品名称	产品序号	报告编码
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	好市多股份有限公...	已发送	AED	ZOLL_AED Plus	X13G616818	JY20230315020900472191
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	公司 嘉...	已发送	AED	ZOLL_AED Plus	X17G940523	JY20230315020500734338
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	立博物馆	待发送	AED	Philips_HS1	A12B-04727	JY20230314100500854855
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	立博物馆	待发送	AED	Philips_HS1	A12B-04727	JY20230314081400598438
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	立博物馆	待发送	AED	Philips_HS1	A12B-04727	JY20230313090600605018
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	立博物馆	待发送	AED	Philips_HS1	A12B-04727	JY20230313083001531124
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	嘉義市立博物館	已发送	AED	Philips_HS1	A12B-04727	JY20230313072200881745

⑦ 點擊「發送」，將報告發送給相關人員。

⑧ 點擊「確定」完成。

9 操作成功

	操作	单位	状态	产品类别	产品名称	产品序号	报告编码
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	好市多股份有限公...	已发送	AED	ZOLL_AED Plus	X13G616818	JY20230315020900472191
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	台湾電力公司 嘉...	已发送	AED	ZOLL_AED Plus	X17G940523	JY20230315020500734338
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	嘉義市立博物館	待发送	AED	Philips_HS1	A12B-04727	JY20230314100500854855
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	嘉義市立博物館	待审核	AED	Philips_HS1	A12B-04727	JY20230314081400598438
<input type="checkbox"/>	详情 修改 提交 审核 发送	嘉義市立博物館	已发送	AED	Philips_HS1	A12B-04727	JY20230313090600605018

⑨ 出現「操作成功」消息後，用戶可以查看和下載檢測報告。

查看檢測報告- 下載



AED云端管理平台

首页 / 报告 / 检验报告

首页 ● 检验报告

查询项目
展开以查询项目。

提交 发送

操作	单位	状态
提交 签核 发送	好市多股份有限公...	已发送
提交 签核 发送	台湾电力公司 嘉...	已发送
详情 修改 提交 签核 发送	嘉義市立博物館	待发送
详情 修改 提交 签核 发送	嘉義市立博物館	待签核
详情 修改 提交 签核 发送	嘉義市立博物館	已发送

检验报告详情

基本资讯

产品类别	AED	品牌	ZOLL	设备型号	AED PLUS
产品序号	X13G616818	制造商	ZOLL		
单位	好市多	联络人	楊文傑	联系电话	05-3200668
职称		邮箱		保固日期	2018-10-22
详细地址	嘉義市忠孝路668號				
所在位置描述	西式餐飲部正前方右邊柱子旁				
报告编码	JY20230315020900472191	生成日期	2023-03-15 10:09:00	报告接收人员	陳佳佑
状态	已发送	接收邮箱	isa.chen@whaleteq.com		

检测内

操作	工单类型	创建时间	处理人	处理时间	状态	备注说明
详情 删除 下载	保养工单	2023-03-15 08:00:00	陳佳佑	2023-03-15 10:08:30	已处理	Test#3

签核信息

签核结果	签核意见	签核人	签核时间
通过		whaleteq_isa	2023-03-15 10:09:37

用戶可以通過 AIMS 或 *DFS200 APP 查看和下載檢測報告
(*更多介紹請參考 DFS200 APP QSG。)

⑩ 點擊「詳情」和「下載」以獲取您的檢測報告。



Test Solutions **for**

Medical Device Manufacturers



www.whaleteq.com
service@whaleteq.com

 8F., No. 125 Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104474, Taiwan

 +886-2-2517-6255

 +886-2-2596-0702

Copyright © 2013-2023, All Rights Reserved.
WhaleTeq Co. LTD



is a registered trademark of WhaleTeq Co. LTD.

All other trademarks or trade names are the property of their respective holders.

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications are subject to change without prior notification by the manufacturer.