


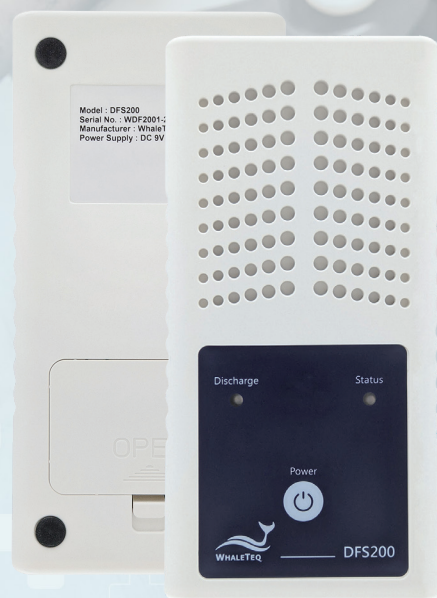

DFS200 AED 巡檢測試儀

具備 AED 除顫測試的各種 ECG 模式和內建電壓電錶 (multimeter)
巡檢維護員可以設置不同的輸出值及設定通過標準

- 搭配操作直覺的專屬 APP，協助使用者輕鬆完成設定及測試
- 提供多種心電圖波形，測試 AED 判讀能力
- 內建電錶 (multimeter) 量測 AED 電池電壓
- 可設定成人和兒童電擊能量通過範圍，確認 AED 符合原廠規格
- 自動留存測試資料，包含電擊焦耳數和波形、電池電壓、日期等，建立測試歷程
- 支援單機操作進行簡易測試
- 選購電腦軟體——單一畫面顯示除顫電擊焦耳數和波形，並支援使用者儲存客製波形、設定常用心電圖訊號於單機模式使用，可應用於品管部門快速驗證 AED 性能

• 電能測量規格

項目	規格
最大能量	範圍：最高可達 600J
電壓	範圍：最高可達 5000Vp 精確度：± (1% 讀值 + 2V) , 典型值
負載電阻	電阻：50Ω
脈衝寬度	範圍：1.0 ~ 50.0ms 精確度：±0.1ms
最大平均功率	12W · 相當於每 30 秒 1 次 360J 的除顫脈衝
電池電量 (AED 電池)	測量電壓：0.40 ~ 40.00V 精確度：5.00 ~ 40.00V : ±0.05V
電池電量 (AED 電池, 負載 200mA 量測)	測量電壓：3.60 ~ 40.00V 精確度：3.60 ~ 40.00V : ±0.05V

• 合規規格

項目	規格
安全標準	CE : IEC / EN61010-1:2010 + A1 : 2016; 汙染等級 2 61010-2-030 : 2017
電磁相容標準 (EMC)	CE : EN61326-1; EN301489-1 / EN301489-17; FCC : EMC P15B
其他標準	CE : RF EN 300328; EN62311; NCC : RF LP0002

* 規格如有更改，恕不另行通知。

• 產品標準組合

產品料號	產品敘述	數量
100-DF00107	產品型號：DFS200 產品名稱：AED 巡檢測試儀	1

• 選購配件

產品料號	產品敘述	數量
G34-0600101	DFS 專用包	1
D06-9000321	9V 鹼性電池	1
K22-0500101 *	開放式 AED 線材 (香蕉頭公頭) · 0.5公尺 (黑色)	1
K22-0500102 *	開放式 AED 線材 (香蕉頭公頭) · 0.5公尺 (紅色)	1
300-DFBMLPD	電池量測探棒 (含負載)	1
K29-0900501	電池量測探棒	1
N61-0210033	快速接頭	1
K27-1800304	USB Type-A 轉 Type-C 線材 (公頭轉公頭) · 1.8公尺	1

* 備註：可客製 AED 線材介面轉接器，請與 service@whaleteq.com 聯繫。

• 選購除顫電擊測試套組

產品料號	產品敘述	數量
300-DFPDOCK	除顫電擊測試基座	1
E13-070P101	除顫電擊測試接收片	2

• 選購軟體

產品料號	產品敘述
HE0-DF00003	DFS200 電腦軟體


• 選購校驗服務及延伸保固

產品料號	產品敘述
YY0007	產品型號：C3 提供鯨揚原廠 (3) 年校驗服務，鯨揚測試儀器可 (1) 年進行校驗一次，確保校驗後符合出廠性能規格。
YY0008	產品型號：R3 產品保固由 (1) 年延長至 (3) 年。


• 產品規格

項目	規格
溫度	操作溫度：0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 儲存溫度：-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
濕度	10% ~ 90% 非冷凝
連線方式	無線通訊 (低功耗無線電) USB Type-C 傳輸介面
操作模式	遠距操作 (APP)
電源	9V 鹼性電池 x 1 APP 顯示電池電量和低電量警報
機構	外殼：ABS 塑料 尺寸 (長 x 寬 x 高) : 17.0公分 x 8.55公分 x 4.0公分 重量：330公克

• AED 測試設置

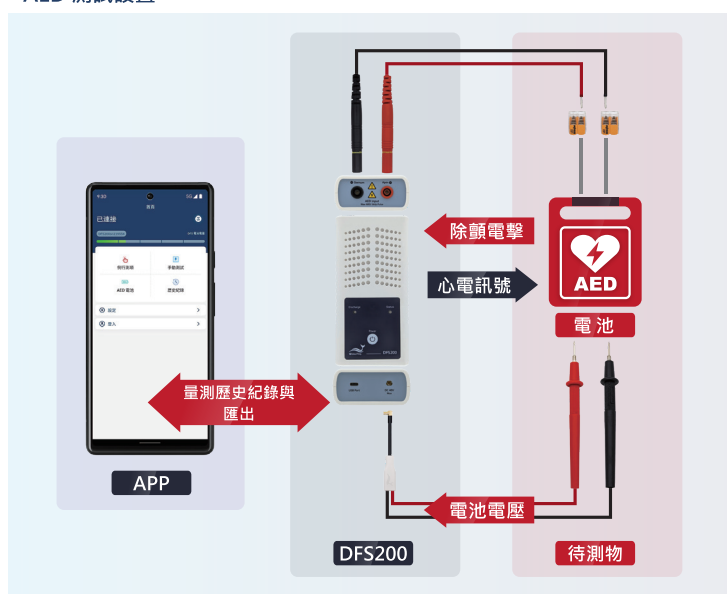

• 除顫器測試設置 (選配)

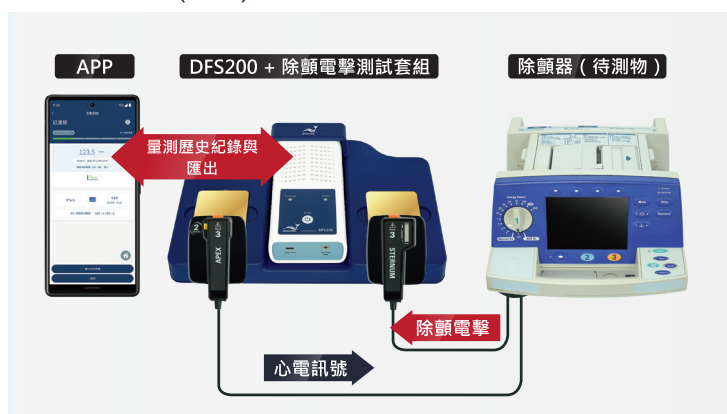

DFS200
Scan for
more information

www.whaleteq.com

service@whaleteq.com

8F., No. 125 Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104474, Taiwan

+886-2-2517-6255

+886-2-2596-0702